


SilTite™ μ -Union. INSTRUCCIONES




PASO A

1a. Enrosque el Connection Nut (2) en el Ferrule/Nut Adapter Tool (1). **NO APRIETE.**

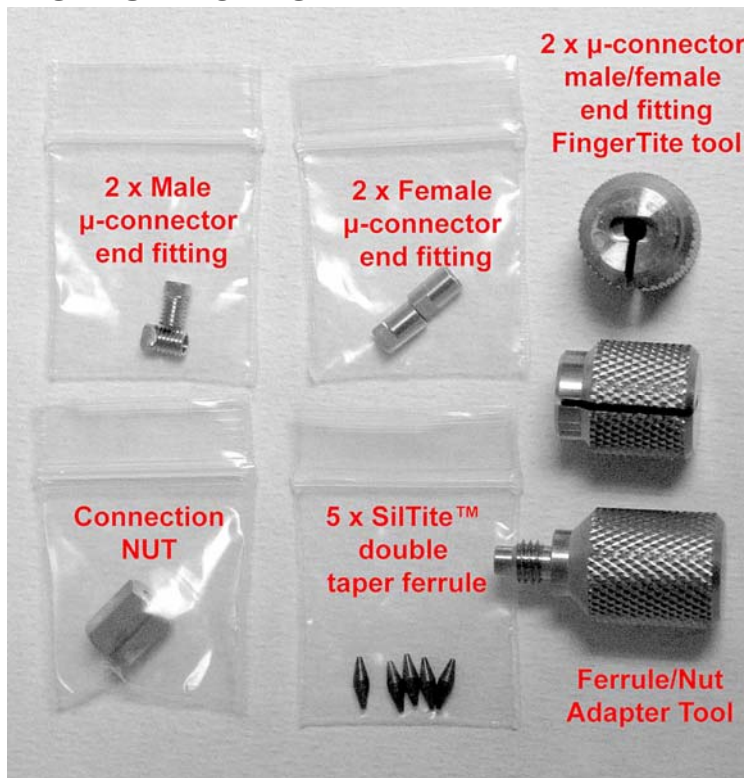

2a. Tome el Male μ -connector end fitting (5) y pase la columna capilar (4). El extremo de la columna hacia el final de la parte roscada del conector.

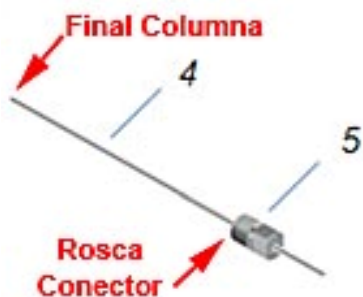


3a. Localice una Double Taper Ferrule (3) y póngala en el Connection Nut (2). Se adapta fácilmente en el asiento. El orificio ha de corresponder con el diámetro de la columna (0.53mm ID = 0.8mm, 0.32mm ID = 0.5mm, 0.25mm ID = 0.4mm)




4a. Inserte la columna capilar en la ferrula (ATENCIÓN: tenga en cuenta la correspondencia de los diámetros en las Double Taper Ferrule (3)) y coloque el male end fitting (5) en posición asegurándose que la columna capilar asienta en la ferrula (hay un tope en la férula que impide que pase a través). Apriete **SUAVEMENTE** con los dedos el male end fitting (5) hasta encontrar resistencia.



5a. Localice un FingerTite μ -connector male/female end fitting tools (6) y deslícelo sobre la columna capilar a través de la ranura. Asegúrese que el FingerTite μ -connector male/female end fitting tools (6) dispone del asiento adecuado para adaptarse al male end fitting (5). Apriete el conector para fijar la ferrula. **NO SOBREPRIETE**, la fuerza de los dedos es más que suficiente para fijar la ferrula en la columna capilar.

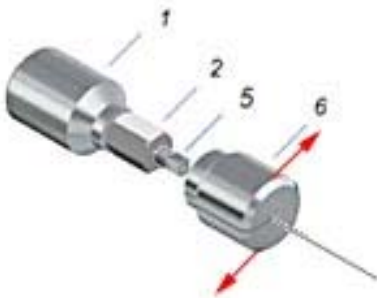

¡Enhorabuena! Acaba de completar el primer paso para la instalación de la SiTite™ μ – Union. (Vea el esquema).

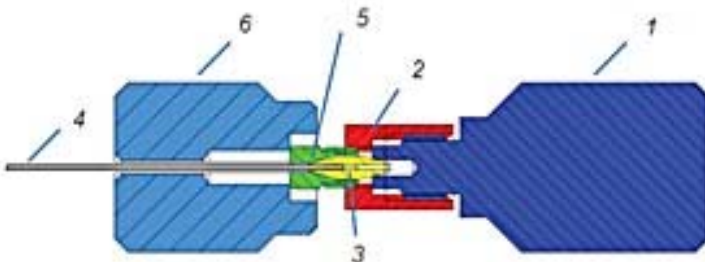


PASO B

1b. Saque male μ -connector end fitting (5) del ferrule/nut adaptor tool – la ferrula ha de estar firmemente fijada en el conector.




2b. Localice un female μ -connector end fitting (7) y pase la otra columna capilar o precolumna. La parte roscada ha de estar hacia el final cortado de la columna.

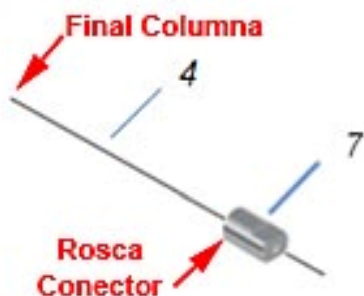

3b. Inserte la columna capilar en la double taper ferrule del punto 1a y deslice la female end fitting (7) en posición asegurándose que la columna asienta en la ferrula (hay un tope en la férula que impide que pase a través). Apriete SUAVEMENTE con los dedos el la female end fitting (7) hasta encontrar resistencia.



4b. Localice un FingerTite μ -connector male/female end fitting tools (6) y deslícelo sobre la columna capilar a través de la ranura. Asegúrese que el FingerTite μ -connector male/female end fitting tools (6) dispone del asiento adecuado para adaptarse al female end fitting (7). Apriete el conector para fijar la ferrula. **NO SOBREPRIETE**, la fuerza de los dedos es más que suficiente para fijar la ferrula en la columna capilar. Vea la Figura siguiente.

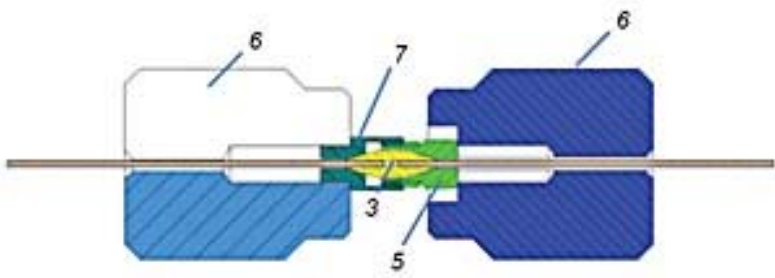

5b. Saque las connection tooling (6) de la union y la columna capilar.



¡Enhorabuena! Acaba de completar los dos pasos para la instalación de la SiTite™ μ – Union.