


# Análisis de Aminopirazol en Primesep 100, Primesep 200 y Primesep A

**Columna:** Primesep 100, Primesep 200 y Primesep A  
**Dimensiones:** 50x4.6mm  
**Fase Móvil:** ACN 50%, H3PO4 0.1%  
**Caudal:** 0.5 mL/min (Primesep A 1.0 mL/min)  
**Detector:** ELSD

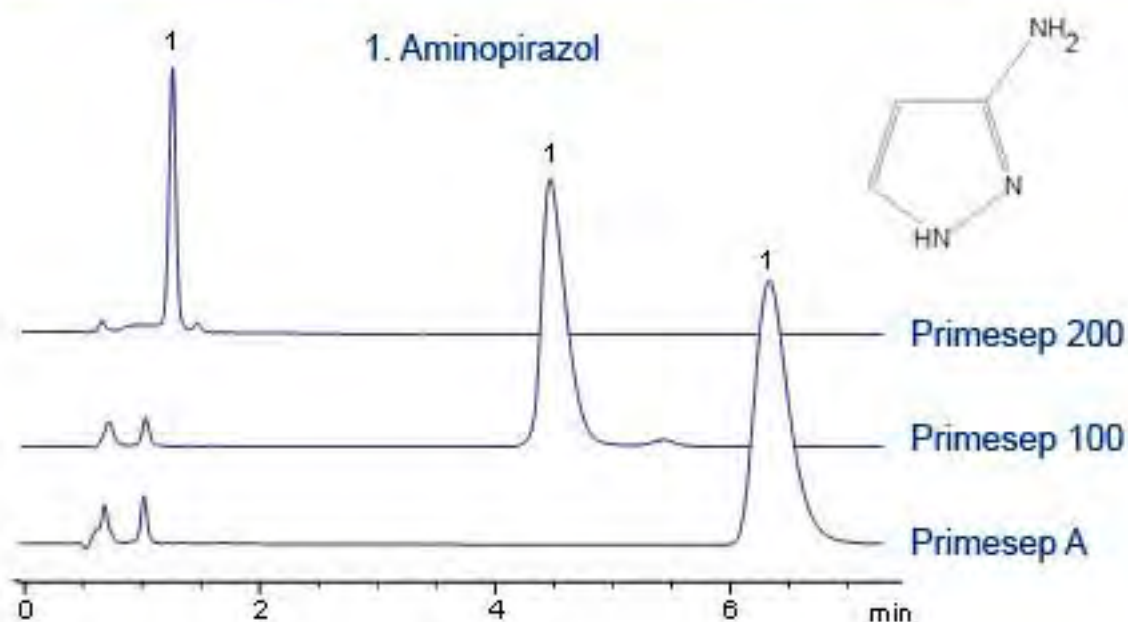

## Notas de Aplicación:

Aminopirazol, Aminopyrazole, Primesep 100, Primesep 200, Primesep A, SIELC, HPLC